



Ovation Medical


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Ortéra OA kolenního kloubu Game Changer

KATALOGOVÉ ČÍSLO OV49001 | OV49002



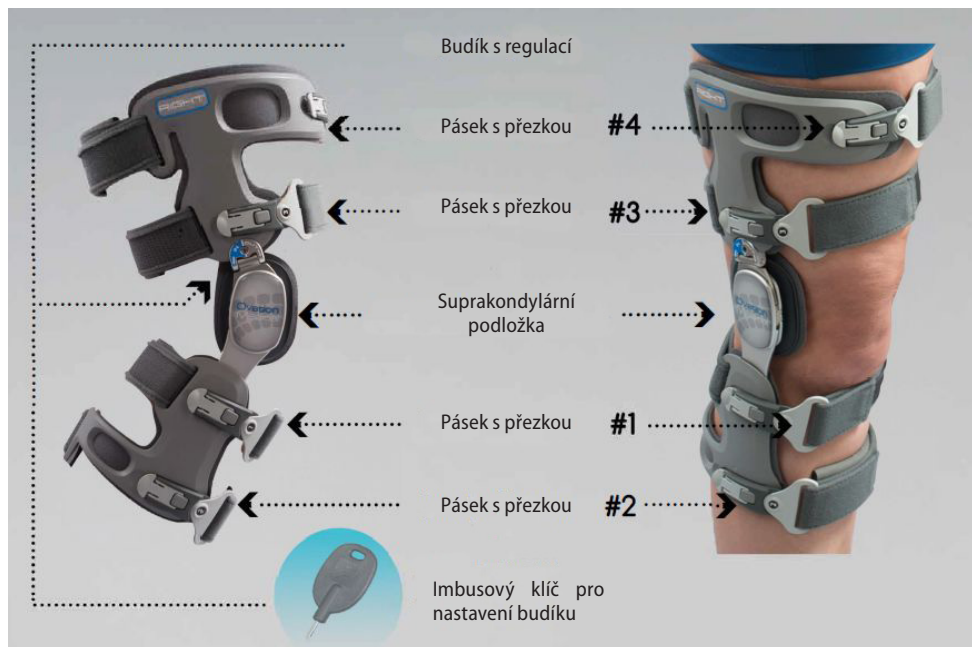

Způsob nasazení:




Odepněte všechny přezky od rámu ortézy nadzvednutím zacvakávacího mechanismu.



Nasadte ortézu na kolenní kloub ohnutý pod úhlem 45 stupňů. Prostředek budíku by se měl nacházet nad česku (viz foto).



Opět připeňte všechny přezky k rámu ortézy v pořadí 1-4. (Jak přizpůsobit délku pásek je popsáno v další části návodu).

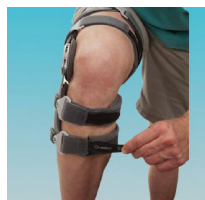

Zkontrolujte konečnou polohu ortézy na končetině dotažením pásek.

Předběžné přizpůsobení budíku (Varus/Valgus):



Pro odlehčení středové části otočte klíčem doleva (IN)

Pro odlehčení boční části otočte klíčem doprava (OUT)



Přizpůsobení ortézy (Varus/Valgus):




Pro definitivní přizpůsobení by pacient měl vstát a udělat pár kroků. Pokud pocítí diskomfort, je třeba opět přizpůsobit pásky. Pokud je diskomfort či bolest cítit v kolenním kloubu, je třeba opět nastavit budík. Pokud je vyžadováno větší odlehčení, je třeba otočit budíkem o více než 1/4 pohybu.



Příslušenství:



Pro lepší přizpůsobení ortézy použijte antimigrační pásek podle schématu níže.

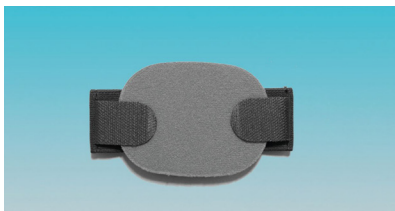


Dodatečná suprakondylární podložka slouží pro lepší přizpůsobení.



Použití blokády úhlu ohybu a vzpřímení je třeba konzultovat s lékařem.

Přizpůsobení pásků:

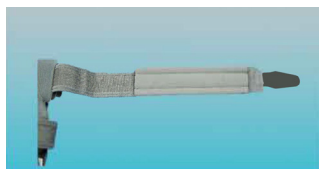

1. Určete požadovanou délku pásku.



2. Odepněte výstelku.



3. Odepněte konec pásku.



4. Odepněte suchý zip od pásku.



5. Seřízněte pásky na požadovanou délku.



6. Opět připeňte k pásku výstelku.

Poznámky:

Zpočátku noste ortézu 30 minut denně a pak postupně prodlužujte dobu nošení. Bolestivé potíže by měly výrazně ustoupit a funkce kolenního kloubu se zlepšit. Ortézu je možné nosit na kůži pod kalhotami. Při používání věnujte zvláštní pozornost stavu pokožky v místech, kde přiléhá ortéza. Jakékoli změny na kůži - zarudnutí, podráždění - neprodleně konzultujte s odborným lékařským personálem.

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ A VÝBĚRU OŠETŘENÍ ČINÍ LÉKAŘ SPECIALISTA.

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl



SPRZET
MEDYCZNY

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz