

Qmed®
Kids



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Kid PROSPINE

ORTÉZA KLÍČNÍ KOSTI



KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQH0W



POZOR!



Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití by Vám měl pomoci zkušený zdravotnický personál. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo jiné kožní problémy, obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.

Použití:

Ortéza klíční kosti pro širokou škálu terapeutických použití. Účinně pomáhá při rehabilitaci a léčbě v případech poranění klíční kosti a usnadňuje korekci vadného držení těla. Lze ji také použít jako preventivní pomůcku pro vytvoření zvyku správného držení těla.

Indikace:

Poranění klíční kosti, která nevyžadují chirurgický nebo ortopedický zákrok.

Posturální vady, které nevyžadují chirurgický zákrok. Syndromy bolesti hrudní páteře.

Hrudní hyperkyfóza.

Kontraindikace:

Kožní oděrky, nedávné rány a další kožní problémy.

Popis výrobku:

Podpěru tvoří pásky vyrobené z úpletu laminovaného pěnou. Speciální konstrukce a široká škála možností nastavení umožňují korigovat držení těla u pacientů různého věku.

Aplikace:

Podpěru tvoří pásky vyrobené z úpletu laminovaného pěnou. Speciální konstrukce a široká škála možností nastavení umožňují korigovat držení těla u pacientů různého věku.

Údržba:

Ortézou je třeba mýt ručně, jemnými čistícími prostředky ve vlažné vodě. Nechlorovat, nečistit chemicky, neprat v pračce, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální poloze. Nežehlit.

POZOR!




Nedodržování pravidel osobní hygieny a mytí produktu nevhodnými čistícími prostředky může mít za následek oděr kůže nebo jiné problémy související s pocením a šířením bakterií. Nepoužívejte výrobek společně s hřejivou masťou nebo gelem. Po umytí výrobek pečlivě opláchněte - zbytky čistícího prostředku, který ve výrobku zůstane, mohou způsobit podráždění pokožky a poškození ortézy.

Velikost

Univerzální

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.



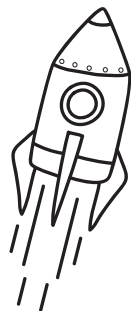

mdh

SPRZĘT
MEDYCZNY

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz