

Qmed[®]
Kids



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Kid AFO-SOFT

ORTÉZA NA KOTNÍK



KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQ10U





AFO-SOFT je otevřená ortéza vyrobená pro širokou škálu terapeutického použití. Pomáhá při léčbě a rehabilitaci poranění a dysfunkcí kotníku. Její konstrukce podporuje boční vazy kotníku a mediální orientaci chodidla.

Indikace:

Podpora při chronické nestabilitě kotníku, léčba poranění laterálních vazů kotníku.

Následná léčba zlomeniny kotníku, následná léčba po operaci. Doporučuje se v případě poranění kloubního pouzdra, zánětu vazů.

Popis výrobku:

Ortéza AFO-SOFT je vyrobena z prodyšné látky Airx a je vybavena speciálními „komfortními oblastmi“, které jsou umístěny na zranitelných místech, aby je chránily proti oděru a poskytovaly lepší stabilizaci. Afo-Soft se zapíná na suchý zip. K dispozici je také 8 pružných stabilizačních pásek, které umožňují regulovat míru tlaku, udržovat napětí v ohybu a podporovat vedlejší vazy. K dostání v jedné univerzální velikosti.

Jak ortézu nasadit:

Rozepněte ortézu a nasadte si ji na nohu. Zapněte pásky na suchý zip a upravte sílu stlačení podle potřeby. Upevněte stabilizační pásky.

Údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C. Nechlorovat, nečistit chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální poloze. Nežehlit.

POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte gely nebo hřejivou mast. Po umytí vždy pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky a poškodit materiál výrobku.


POZOR!



Výrobek není nehořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřených zdrojů ohně.

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.



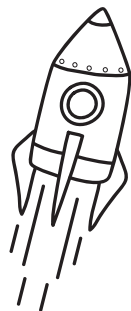

mdh

SPRZĘT
MEDYCZNY

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz