


## Wskazówki odnośnie przechowywania

Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed wilgocią.

## Wskazówki odnośnie konserwacji.

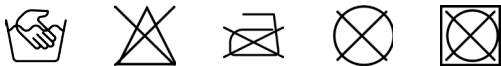

Ortezę prać ręcznie w temperaturze do 35° z użyciem łagodnych środków piorących. Nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wirować, nie wykręcać, delikatnie wycisnąć przed suszeniem. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Nie prasować.

## Gwarancja

Czas gwarancji określony jest przepisami prawa.


## Utylizacja

Produkt można utylizować wraz z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego.

## Storage information

The storage location should be dry and at room temperature. The product has to be protected against direct sunlight exposure and humidity.

## Cleaning information

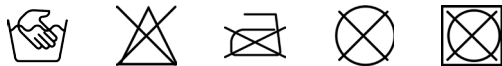

Elbow Safe should be washed using gentle detergents in max. temperature 35°. Do not chlorinate, do not dry clean, wring gently before drying. Do not dry close to the artificial warmth source. Dry in horizontal position. Do not iron.

## Guarantee

The guarantee lies within the framework of the legal regulations.

## Disposal

The product can be disposed of with the normal household waste.

## Výrobce/Manufacturer

 mdh sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104  
94-007 Łódź  
www.qmedbymeira.pl  
ortopedia@mdh.pl  
tel. +48 42 636 81 44

**Qmed**<sup>®</sup> **ELBOW SAFE**  
BY MEYRA

CE



Vydání 16.09.2021

Edition 16.09.2021

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ/INSTRUCTIONS FOR USE

Katalogové číslo/Catalogue number: DRQFOG Basic UDI-DI: 59017804DRQFOGLT

CZ

### Elbow Safe Ortéza lokte

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Meyra-Ortopedia Group. Náš výrobek splňuje všechny zákonné požadavky v souladu se zákonem o léčivých přípravcích.

Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a postupujte podle uvedených pokynů a doporučení. V případě dalších dotazů vám pomůže váš lékař, prodejce nebo naše servisní hotline.

### Popis výrobku

Vysoce elastická, prodyšná tkanina zajišťuje optimální přizpůsobení anatomickému tvaru kompresi měkkých tkání, která zabraňuje otokům. Ortéza odlehčuje svalové a vazivové struktury, zejména úpony svalových extenzorů a flexorů. Elbow Safe je univerzální pomůcka pro pravý i levý loket.

### Bezpečnostní pokyny

Ortéza by měla být používána podle doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta. Ortézu by měl poprvé nasadit a nastavit kvalifikovaný zdravotnický personál. Před použitím ortézy si pozorně přečtěte návod. Výrobek se nesmí nosit na otevřené rány.

EN

### Elbow Safe Elbow brace

Thank you very much for selecting a product of the Meyra-Ortopedia Group. The product complies with all legal regulations according to the Medical Products Law.

Please read the directions for use carefully and keep to the advice and recommendations given. Should you have further questions please address the responsible physician, your local specialist dealer or our service hotline.

### Product description

Highly elastic, breathable fabric ensures optimal adaptation to anatomical shape soft tissue compression which prevents oedema. Additional pads and band relieve muscle- tendon structures, especially attachments of muscles extensor and flexor. Elbow Safe is an universal aid for right and left elbow.

### Safety instructions

The first application of the product must be carried out by special personnel trained on these kind of products as otherwise the product liability cannot be guaranteed. The product must not be worn on open wounds.

