


**MEYRA®**  
*medical*

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

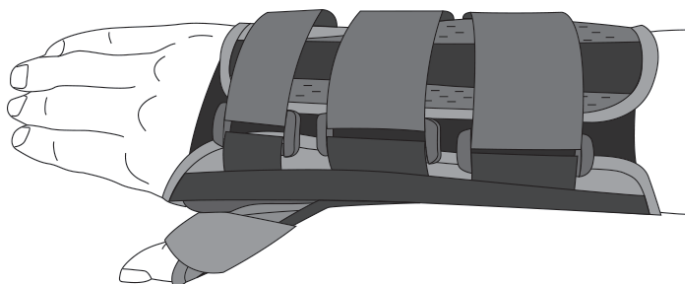

**THUMB VERSA **FIT**™**

**ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ IFU**

**KATALOGOVÉ ČÍSLO MQC2C**

**CE**

## Indikace:

Léčba poranění zápěstí, palce a distálního předloktí. Chronická nestabilita zápěstí a palce se syndromem bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření. Ochrana zápěstí a palce ve sportu nebo rizikových povoláních (přetížení).

## Kontraindikace:

Případy vyžadující imobilizaci zápěstního kloubu nebo palce, např. zkrivení distálních částí kosti předloktí nebo kostí zápěstí.

## POZOR!



Pomůcka by měla být používána pouze jedním pacientem. Pokud nastanou potíže s nasazením nebo používáním ortézy, kontaktujte kvalifikovaný zdravotnický personál.

## Údržba:

Ortézu lze po odstranění hliníkové části umýt ručně s pomocí velmi jemných čistících prostředků při teplotách do 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neždímat a před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo umělé zdroje tepla, v rozloženém stavu.

## Pokyny pro aplikaci:

1. Zasuňte ruku do ortézy a zasuňte palec do podpěry pro palec.
2. Umístěte spodní přední okraj ortézy pod palmární záhyb.
3. Provlékněte očka pásků skrz D-kroužky.
4. Jemně zatáhněte za pásy, dokud nebude ortéza napnutá, a panel VERSA FIT se automaticky přizpůsobí velikosti ruky uživatele. Proximální pásek (A) uzamkne panel do funkční velikosti.
5. Nasadte poutko na palec a připevněte ho k háčku.
6. Konečná aplikace.

**POZNÁMKA:** Vyvarujte se přílišnému utažení ortézy. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pásek nastavíte ještě jednou nebo vícekrát, podle potřeby.







## POZOR!



Pokud se zvětší otok nebo pozorujete bolesti, necitlivost nebo podráždění pokožky, přestaňte ortézu používat. Okamžitě kontaktujte poskytovatele zdravotní péče. Tento výrobek je pouze podpůrným zařízením, nepoužívá se, aby se zabránilo zranění nebo prevence.

## Velikost:

Velikost	Obvod zápěstí
XS	< 9 cm
Standard	9-25 cm
XL	> 22 cm

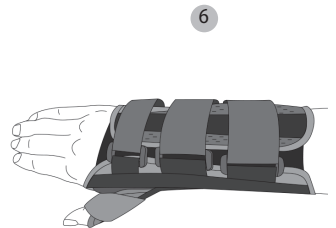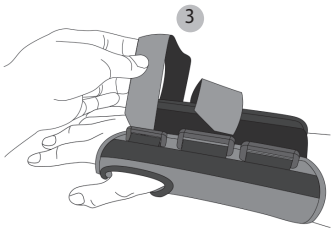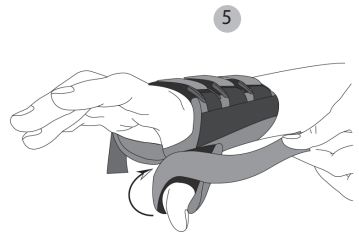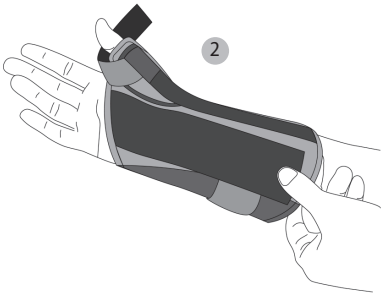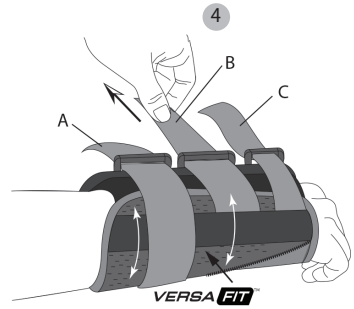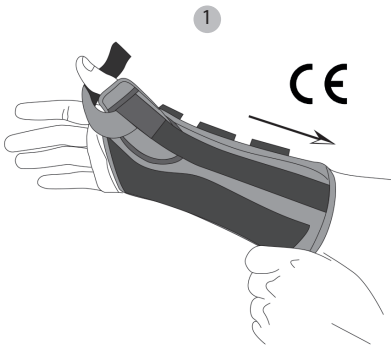



**SPRZĘT  
MEDYCZNY**

**Výrobce:**

**mdh sp. z o.o.**  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)