

NÁVOD K POUŽITÍ

Fun Baby

Dětská rehabilitační autosedačka

DRVR0B

Vydání AM 08.2021

VITEA[®] CARE

CE



Obsah

1. Úvod	3
2. Popis výrobku	3
3. Použití	5
4. Kontraindikace	5
5. Používání	5
6. Bezpečnostní pokyny	14
7. Každodenní provoz a údržba	15
8. Symboly	15
9. Kontaktní údaje	16

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

1. Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili náš výrobek. Jsme hluboce přesvědčeni, že splní vaše očekávání. Před prvním použitím si prosím přečtete tento dokument. Tento návod si klade za cíl poskytnout informace nezbytné pro bezpečné používání zařízení. Správně uplatněná doporučení významně přispějí k prodloužení životnosti a estetiky výrobku. Chceme zdůraznit, že se neustále snažíme zlepšovat kvalitu našich výrobků, což může mít za následek drobné změny, které nejsou obsaženy v návodu.

2. Popis výrobku



Obrázek 1

1. Seřizovací páčka opěrky hlavy
2. Opěrka hlavy
3. Ramenní vycpávka
4. Ramenní pás
5. Redukční vložka
6. Klapka seřizovače pásu
7. Přední dotahovací pás
8. Podstava sedačky
9. Textilní potah sedačky
10. Červená stiskací západka
11. Podložka
12. Přezka
13. Polstrování v rozkroku
14. Tlačítko pro nastavení délky pásu



Obrázek 2

- 15. Tlačítko pro nastavení výšky opěrky hlavy
- 16. Modrý vodící otvor
- 17. Horní upevňovací pás
- 18. Seřizovač pásu
- 19. Kovová přezka
- 20. Otočná páčka
- 21. Tlačítko FIX

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ AUTOSEDAČKY



- Chránič předních sedadel a organizér; ochranná podložka pod sedadlo; stolek



- Hlavová stabilizační páska, abdukční klín

3. Použití

Rehabilitační dětská autosedačka „Fun Baby“ je určena k přepravě dětí se speciálními potřebami v osobních vozidlech. Dětská sedačka je vhodná pro děti od narození až do tělesné hmotnosti 36 kg.

Mezi klinické indikace patří:

- dětská mozková obrna
- syndrom hypotonie nespecifikovaného původu
- svalová dystrofie

Autosedačka díky své konstrukci poskytuje bezpečí, stabilizaci hlavy a pánve.




4. Kontraindikace

Stavy vyžadující stabilizaci a podporu dolních končetin.


5. Používání

- Po vybalení krabice zkontrolujte, zda obsahuje všechny součásti podle výše uvedeného seznamu.
- Ujistěte se, že žádné prvky autosedačky nevykazují viditelné mechanické poškození. V případě pochybností kontaktujte výrobce.
- Nepoužívejte autosedačku, dokud nejsou všechny součásti správně připojeny.

5.1. Instalace.

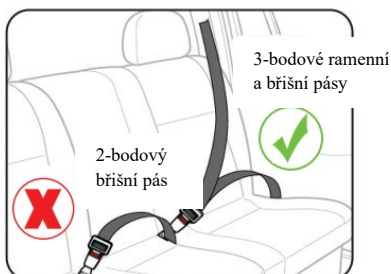

Autosedačku je vhodná pouze pro vozidlo vybavené 3-bodovým bezpečnostním pásem s aretací a 3-bodovým navijáčem, které splňují požadavky nařízení EU/EHK č. 16 nebo jiných rovnocenných norem.

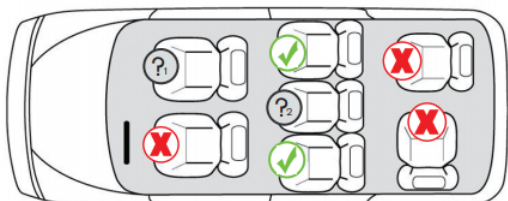


?1 - Neinstalujte autosedačku, pokud je aktivovaný airbag u spolujezdce.


?2 - Instalace dětské sedačky se nepovoluje, pokud je sedadlo spolujezdce vybaveno pouze 2bodovým bezpečnostním pásem.

PŘÍPRAVA UCHYCENÍ


- Pokud váš vůz není vybaven vodicím pouzdrum ISOFIX, vložte dvě vodicí pouzdra FIX (2) připevněná k autosedačce do kotvicího zařízení ISOFIX (1) (obrázek 3).
- Tip: Upevňovací zařízení FIX se nachází mezi sedadlem a opěradlem vozu.
- Stiskněte červené tlačítko FIX a vytáhněte hák držáku FIX (3) do jeho nejdelší polohy (obrázek 4).
- Nastavte FIX západku vozu, vysuňte ji z vodicího pouzdra, až uslyšíte cvaknutí. Sledujte signalizaci na systému FIX dokud se červená změní na zelenou, a pokud svítí zeleně, znamená to, že instalace byla úspěšná (obrázek 5). Poté zatlačte sedačku na doraz na sedadlo vozu.

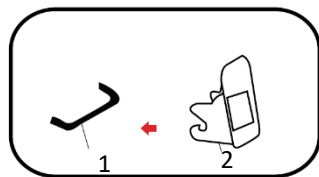

Obrázek 3

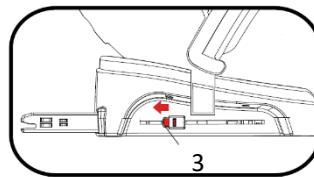

Obrázek 4

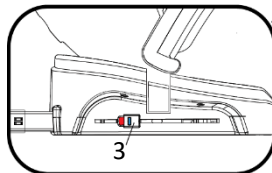


Obrázek 5

5.2. NASTAVENÍ RAMENNÍHO PÁSU A OPĚRKY HLAVY PŘI POUŽITÍ 5-BODOVÉHO PÁSU (SKUPINA 0+, I).


- Stiskněte centrální nastavovací prvek (4) a současně zatáhněte za oba ramenní popruhy (5). Netahejte za podložky pásu (6) a neuvolňujte 5bodový pás do nejdelší polohy (obrázek 6).
- Zatáhněte za rukojeť nastavení opěrky hlavy (7) a současně ji vytáhněte nahoru nebo přitlačte opěrku hlavy (8) do požadované polohy dítěte a zajistěte ji (obrázek 7).

Opěrka hlavy musí být správně nastavena (8), aby poskytovala maximální ochranu vašemu dítěti v sedačce. Nastavte výšku opěrky hlavy (8) podle výšky ramenního popruhu a výšky ramen vašeho dítěte (obrázek 8).


UPOZORNĚNÍ: Ramenní popruhy nesmí být pod ramenem dítěte nebo nad výškou uší.

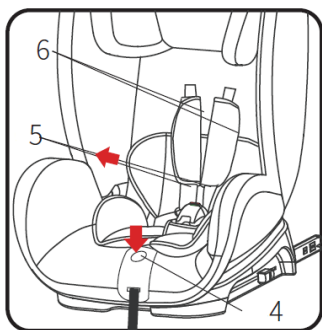

Obrázek 6

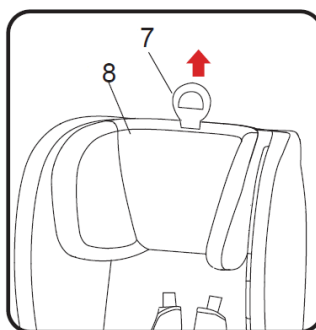

Obrázek 7

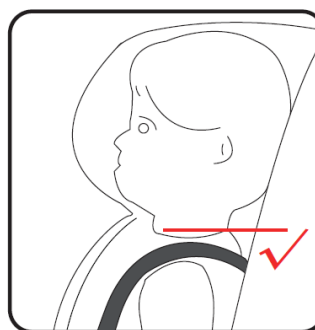

Obrázek 8


5.3. NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY PŘI POUŽITÍ 3BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU VOZIDLA (SKUPINA II, III)

- Stisknutím páčky opěrky hlavy ve směru šipky (9) nechte opěrku hlavy (8) odjištěnou, aby bylo možné opěrku hlavy nastavit (8) nahoru a dolů do požadované polohy. Uvolněte seřizovací páčku opěrky hlavy (9) a opěrka hlavy se automaticky uzamkne (obrázek 9).
- Jestliže poloha opěrky hlavy (8) dítěti nevyhovuje, můžete ji nastavit pomocí rukojeti (7) podle kapitoly 5.2.
- Správným nastavením opěrky hlavy (8) zajistíte, aby byla šikmá část bezpečnostního pásu vozu (10) v nejlepší poloze pro zajištění optimální bezpečnosti vašeho dítěte. Opěrku hlavy

seďačky (8) je nutno nastavit tak, aby mezi ramenem dítěte a opěrkou hlavy (8) byla mezera přibližně na dva prsty (obrázek 10).




Obrázek 9

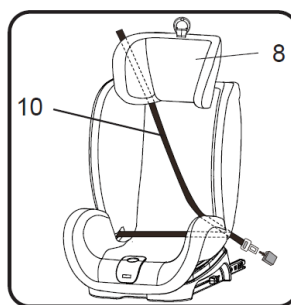

Obrázek 10

5.4. SEŘÍZENÍ NÁKLONU DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY (SKUPINA I, II, III)

- Stiskněte seřizovací páčku (11) ve směru šipky. Ponechte korpus sedáku (12) odjištěný, aby bylo možné sedadlo (12) nastavit, posuňte jej do vhodné polohy, uvolněte seřizovací páčku (11), sedák se znovu automaticky uzamkne (obrázek 10).

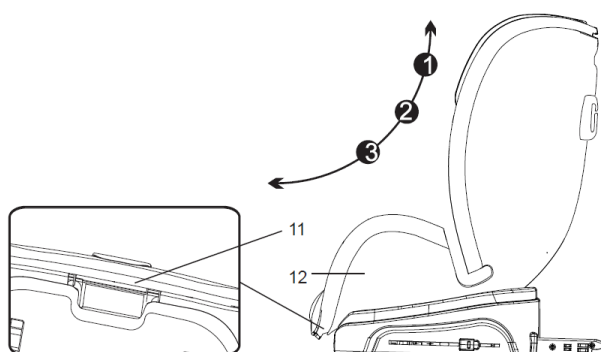


Obrázek 11


5.5. NASTAVENÍ OTÁČENÍ DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY O 360 °

Nejprve nastavte sedačku dopředu o 3 polohy (obrázek 12), poté stisknutím seřizovací páčky otočte sedadlo o 180°, (obrázek 13 zobrazuje polohu sedačky proti směru jízdy), otočte na místo, povolte seřizovač, posuňte sedačku a ujistěte se, že je zajištěna (obrázek 13).

Během jízdy lze sedačku používat ve směru nebo proti směru jízdy. Sedačka musí být po dokončení seřízení uzamčena ve stabilní poloze.

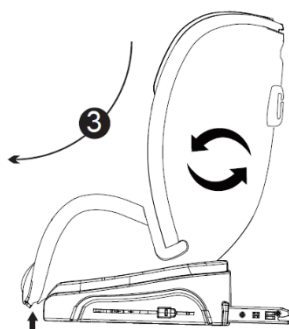

Obrázek 12

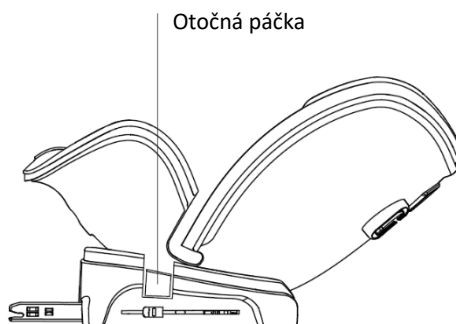

Obrázek 13

5.6. INSTALACE PROTI SMĚRU JÍZDY

Instalace skupiny 0+ (FIX + 3bodový bezpečnostní pás vozidla)


(Vhodný pro děti ve věku od 0 do 1 a půl roku nebo o hmotnosti 0-13 kg)

Pozor: skupina 0+ (0-13 kg) musí používat montážní polštář a podložku na spaní.

1. Podle kapitoly 5.4 nastavte sedačku (14) do maximální nakloněné polohy a ujistěte se o jeho uzamknutí (nemůže se pohybovat).
2. Podle kapitoly 5.5 otočte tělo sedačky (14) do protisměru jízdy a ujistěte se o jeho uzamknutí (nemůže se otáčet).
3. Informace o systému FIX najdete v kapitole 5.1. Vložte dva konektory FIX do vodicího pouzdra, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, a indikátor FIX se rozsvítí zeleně. Poté sedačku zatlačte tak, aby byla zcela ukotvena se sedadlem vozidla.

Pozor: Konektor FIX je správně nainstalován, pouze pokud se indikátor FIX zbarví zeleně.

4. Vytáhněte 3-bodový bezpečnostní pás vozidla, protáhněte břišní pás vozu šterbinou polštáře (obrázek 14-A) a poté protáhněte pás vozu zadní částí dvou vodicích drážek (obrázek 14-B) a zacvakněte do zámku pásu (obrázek 12-C).
5. Utáhněte 3-bodový bezpečnostní pás tak, aby nebyl prověšený nebo překroucený.
6. Rozepněte 5-bodovou přezku, posaďte dítě do sedačky a nastavte pás do správné polohy. (Viz kapitola 5.2 o nastavení pětibodových bezpečnostních pásů).

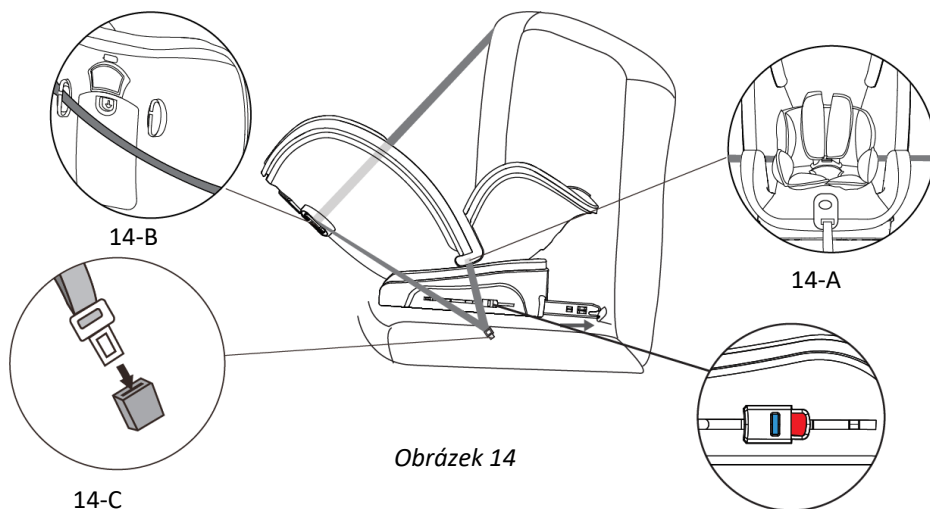

Obrázek 14

5.7. INSTALACE VE SMĚRU JÍZDY

Montážní skupiny (FIX + 3-bodový pás vozidla + horní popruh)


1. Skupina I (určeno pro děti ve věku přibližně od 9 měsíců do 4 let nebo o hmotnosti 9-18 kg)

POZNÁMKA: Skupina I (9~18KG) (obrázek 16) Demontujte podložku na spaní.

2. Podle kapitoly 5.5 nastavte sedák (14) do přední polohy a ujistěte se, že je zajištěn (nemůže se otáčet).
3. Podle kapitoly 5.4 nastavte sedák (14) do správné polohy a ujistěte se, že je zajištěn (nemůže se pohybovat).
4. Viz kapitola 5.1. Vyrovnějte FIX západku vozidla, vložte ji do vodicího pouzdra, až uslyšíte cvaknutí. Sledujte signalizaci na systému FIX, pokud se červená změní na zelenou, znamená to, že instalace proběhla úspěšně (obrázek 5.). Poté zatlačte autosedačku zcela na sedadlo vozidla (obrázek 15).
Pozor: Západka FIX je správně nainstalována, pouze pokud se indikátor FIX zbarví zeleně.

5. Vyměňte podložku na spaní z dětské autosedačky. (Obrázek 16-B).

6. Odpojte tříbodový bezpečnostní pás vozu, protáhněte břišní pás vozu šterbinou polštáře, poté prostrčte 3-bodový ramenní popruh boční stranou vodička opěrky hlavy (obrázek 16-A). Poté jej vložte do otvoru pro bezpečnostní pás. Pásky vozu by měly procházet spodem z levé podložky (obrázek 16-C).

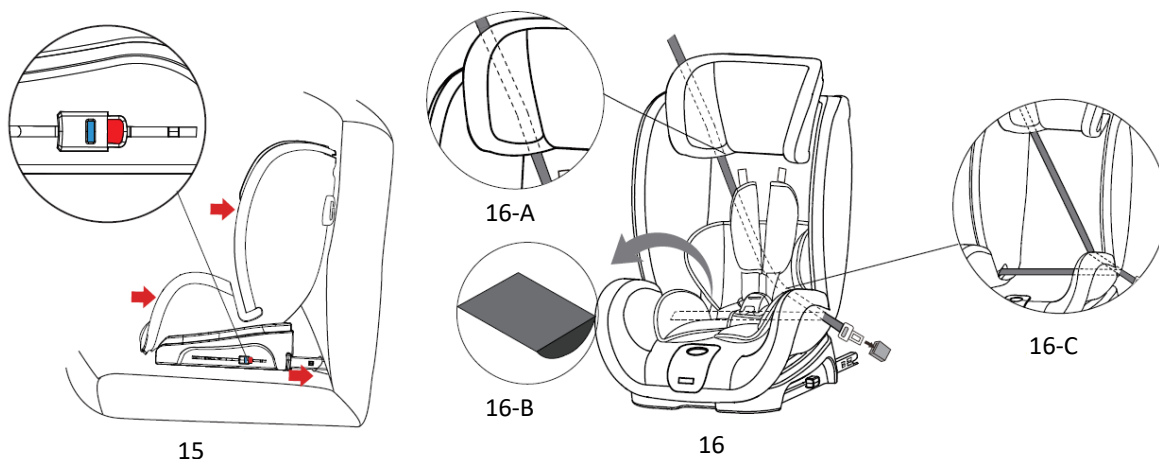


7. Stiskněte tlačítko horního upevňovacího pásu a uvolněte jej na příslušnou délku (obrázek 17.).


8. Přichytněte horní upevňovací pás k doporučeným úchytným bodům. Vyhledejte označení ve svém vozidle nebo se poraďte s prodejcem vozidla.

9. Zatáhněte za vyčnívající část popruhu horního upevňovacího pásu tak, aby byl pás napnutý, dokud se kontrolka nastavení horního upevňovacího pásu nerozsvítí zeleně. Pro zajištění bezpečnosti dětské autosedačky věnujte po každé instalaci prosím pozornost kontrole následujících položek:

- Ujistěte se, že dva konektory FIX jsou řádně připojeny k západce FIX vozu a že kontrolka připojení FIX svítí zeleně.
- Ujistěte se, že je autosedačka pevně připevněna k sedadlu vozu.
- Zkontrolujte, že je horní upevňovací pás napnutý a kontrolka svítí zeleně.
- Ujistěte se, že 5-bodový bezpečnostní pás těsně přiléhá k vašemu dítěti, ale nemačká je.
- Zkontrolujte, zda jsou popruhy řádně nastaveny a nejsou překrouceny.
- Zajistěte, aby výška ramenních vycpávek byla stejná jako výška ramen dítěte.
- Ujistěte se, že je zajištěn pětibodový úchyt.
- Ujistěte se, že je 3-bodový bezpečnostní pás vozu správně nainstalovaný.

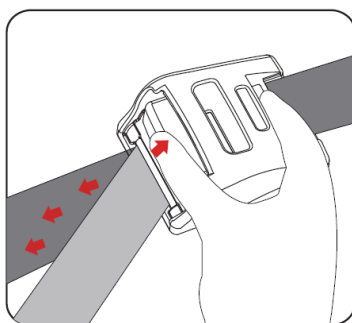

Obrázek 17

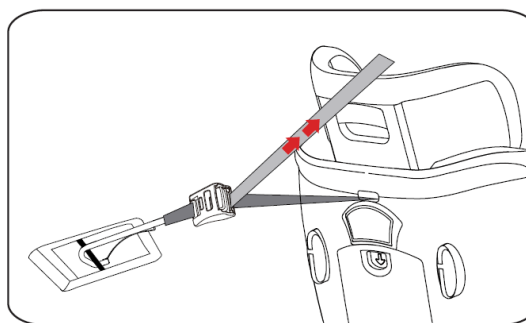

Obrázek 18

5.8 SKUPINA II, III MONTÁŽ (FIX + 3BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS + HORNÍ UPEVNĚVACÍ PÁS)

1. Skupina II, III (určeno pro děti ve věku 3 až 12 let nebo o hmotnosti 15-36 kg)

Poznámka: Demontáž 5-bodového pásu ve skupinách II, III (15 až 36 kg).

2. Ujistěte se, že je 5-bodový pás správně odstraněn (viz kapitola 7.).

3. Informace o nastavení opěrky hlavy najdete v kapitole 5.3.

4. Informace o nastavení sedáku a potvrzení stavu uzamknutí (nemůže se pohnout) najdete v kapitole 5.4.

5. Informace o nastavení sedáku a potvrzení uzamknutí (nemůže se otáčet) najdete v kapitole 5.5.

6. Informace o funkci FIX najdete v kapitole 5.1. Vložte dva konektory FIX do vodícího pouzdra, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, indikátor FIX se rozsvítí zeleně. Poté zatlačte bezpečnostní sedačku tak, aby byla zcela ukotvena se sedadlem vozidla (obrázek 19).


Pozor: Konektor FIX je správně nainstalován, pouze pokud se indikátor FIX zbarví zeleně.

7. Umístěte sedačku do vozu ve směru jízdy a potom do něj posaďte dítě.


8. Protáhněte bezpečnostní pás vozu kolem dítěte, poté zasuňte přezku bezpečnostního pásu do zámku, až uslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že je bezpečnostní pás zajištěn (obrázek 20).

9. 3-bodový břišní pás vozu protáhněte drážkou pod loketní opěrkou na obou stranách sedadla, aby bylo zajištěno, že břišní pás spolehlivě omezí polohu pánve. Mezitím prostrčte ramenní popruh bezpečnostního pásu vozu otvorem v boční opěrce hlavy (obrázek 20-A), potom zastrčte přezku do zámku bezpečnostního pásu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Poté pás utáhněte.

Poznámka: Zkontrolujte, zda není bezpečnostní pás překroucený nebo zauzlováný.

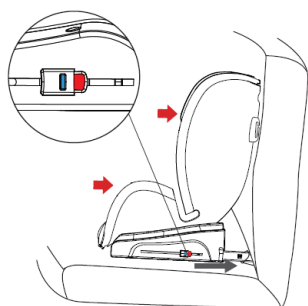

Obrázek 19.

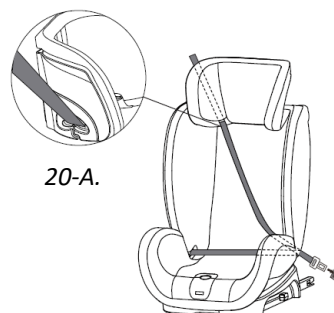

Obrázek 20.


10. Stiskněte tlačítko horního upevňovacího pásu a uvolněte jej na příslušnou délku (obrázek 21.).

11. Připojte horní upevňovací pás k doporučeným úchytným bodům. Vyhledejte označení ve svém vozidle nebo se poraďte s prodejcem vozidla.


12. Zatáhněte za vyčnívající části popruhu horního upevňovacího pásu tak, aby byl popruh napnutý, dokud se indikátor nastavení horního upevňovacího pásu nerozsvítí zeleně (obrázek 22).

Pro zajištění bezpečnosti dětské autosedačky věnujte po každé instalaci pozornost kontrole následujících položek:

- Ujistěte se, že dva konektory FIX jsou řádně připojeny k západce FIX vozu a že kontrolka připojení FIX svítí zeleně.
- Ujistěte se, že je autosedačka pevně připevněna k sedadle vozu.
- Zkontrolujte, že je horní upevňovací pás napnutý a kontrolka svítí zeleně.
- Ujistěte se, že 5-bodový bezpečnostní pás těsně přiléhá k vašemu dítěti, ale nemačká je.
- Zkontrolujte, zda jsou popruhy řádně nastaveny a nejsou překrouceny.
- Zajistěte, aby výška ramenních vycpávek byla stejná jako výška ramen dítěte.
- Ujistěte se, že je zajištěn pětibodový úchyt.
- Ujistěte se, že je 3-bodový bezpečnostní pás vozu správně nainstalovaný.

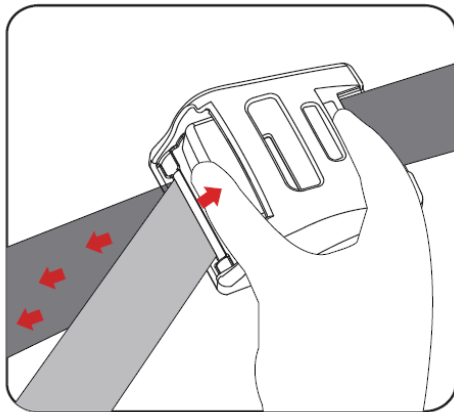

Obrázek 21.

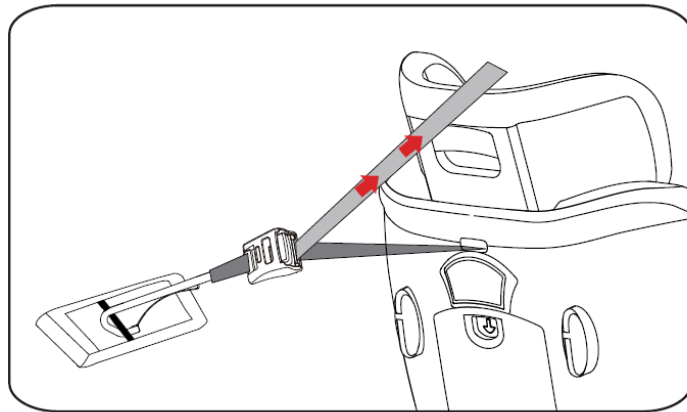

Obrázek 22.

DEMONTÁŽ 5-BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

1. Stiskněte tlačítko pro nastavení délky pásu (4) a současně zatáhněte za oba ramenní popruhy (5). Netahejte prosím za vycpávky na ramenních popruzích. Pokuste se uvolnit 5-bodový bezpečnostní pás do nejdlejší polohy (obrázek 23).

2. Zatáhněte za rukojeť pro nastavení opěrky hlavy (7) a zatlačte opěrku hlavy (8) do nejnižší polohy (obrázek 24).

Otočení autosedačky do polohy proti směru jízdy:

3. Stisknutím tlačítka (31) otevřete zadní kryt (32) (Obrázek 25).

4. Vytáhněte smyčky ramenního popruhu (42) ze spojovacího článku (33), (obrázek 26).

5. Vložte spojovací článek (33) do otvoru (34) a zajistěte jej (obrázek 27).

6. Posuňte poutka ramenní vycpávky (35) ze dvou stran prodloužení (36), (obrázek 28).

7. Zaklopte zadní kryt autosedačky.


Otočení autosedačky do polohy ve směru jízdy:

8. Provlákněte ramenní popruhy (5) a ramenní vycpávky (6) skrz otvory (37), (obrázek 29).

9. Otevřete 5-bodovou svorku (19), (obrázek 30).

10. Vytáhněte ramenní popruh zevnitř sedadla (obrázek 31).

11. Zatlačte 5-bodovou přezku a pás dolů (obrázek 32), dokud nevytáhnete přezku ze spojky. Sejměte spojku. Dosáhnete otvoru v 5-bodovém pásu (obrázek 33).

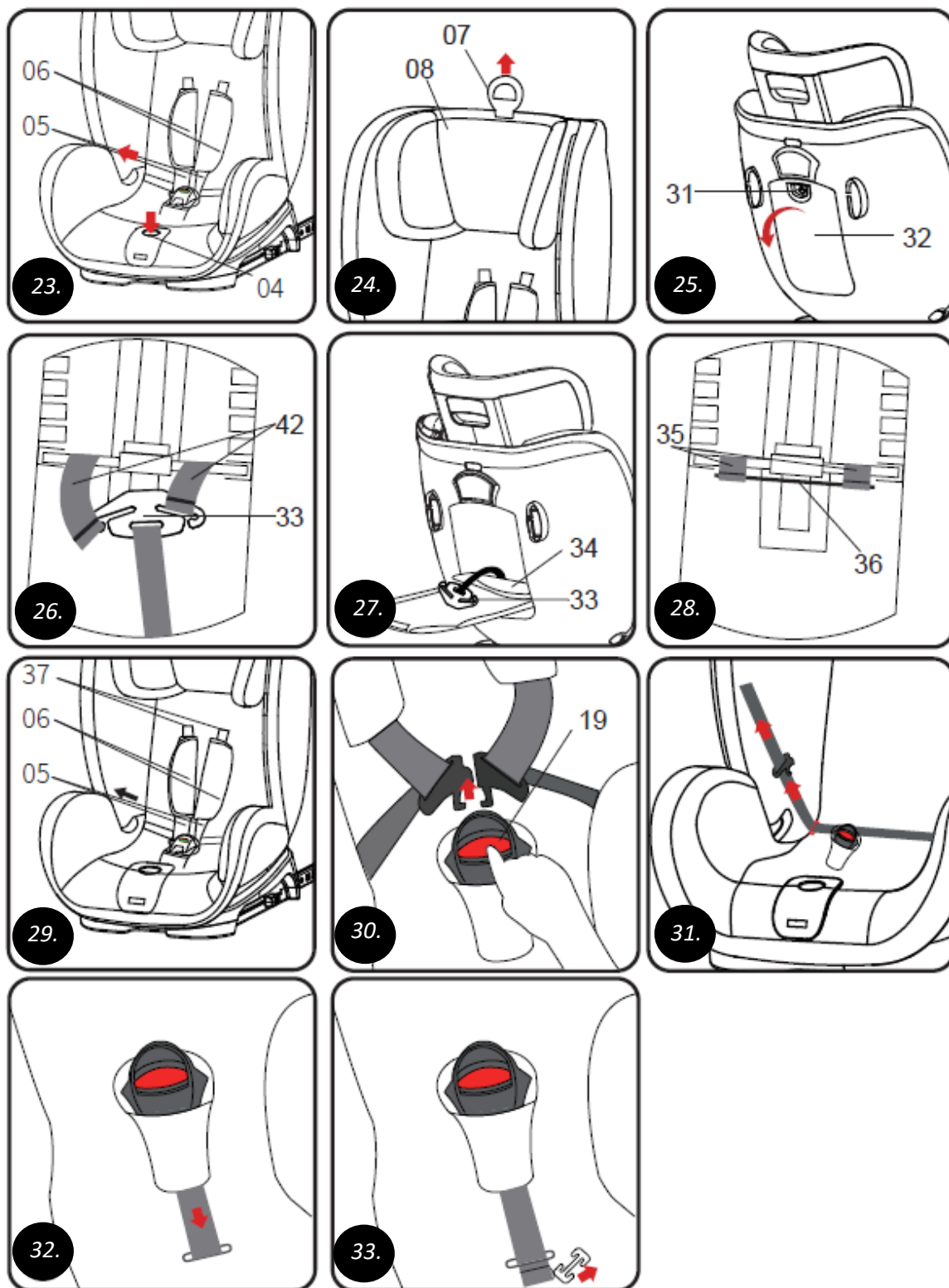

Instalace 5-bodového bezpečnostního pásu

1. Poznámka: Ramenní popruhy sedačky a 5-bodový pás jsou dva různé otvory, jeden je skupina 0+, druhý skupina I, II, III. Zvolte otvor podle aktuální potřeby (obrázek 34A).
2. Protáhněte pásek přezky otvorem v sedáku a připevněte kovovou sponu (obrázek 35).
3. Vytáhněte pásek přezky směrem nahoru, aby se kovová spona zasekla a zabránila překroucení

pásu (obrázek 36).

4. Protáhněte sejmutý ramenní popruh (obrázek 37) otvory na obou stranách sedačky.

5. Zacvakněte dvě kovové spony a vložte do přezky (obrázek 38.).

Pozor: Zajistěte, aby se popruh nepřekroutil.

6. Stisknutím tlačítka pro nastavení výšky opěrky hlavy (9) nastavte opěrku hlavy (8) do nejnižší polohy. Zvedněte rukojeť nastavení opěrky hlavy (7) a zatlačte opěrku hlavy (8) do nejnižší polohy (obrázek 39).

7. Protáhněte levý i pravý popruh ramenními vycpávkami. Utáhněte oba ramenní popruhy a ramenní vycpávky a poté je protáhněte otvory (Obrázek 40).

Obnovte polohu proti směru jízdy:

8. Stisknutím tlačítka zadního krytu otevřete zadní kryt (Obrázek 41).


9. Nasad'te dvě ramenní poutka na oba konce držáku opěrky hlavy (Obrázek 42).

10. Sejměte kovovou sponu (obrázek 43).

11. Vložte dvě smyčky ramenních popruhů do výřezů kovové spony (obrázek 44).

Pozor: Zajistěte, aby se ramenní a břišní popruhy nepřekroutily.

12. Zavřete zadní kryt.

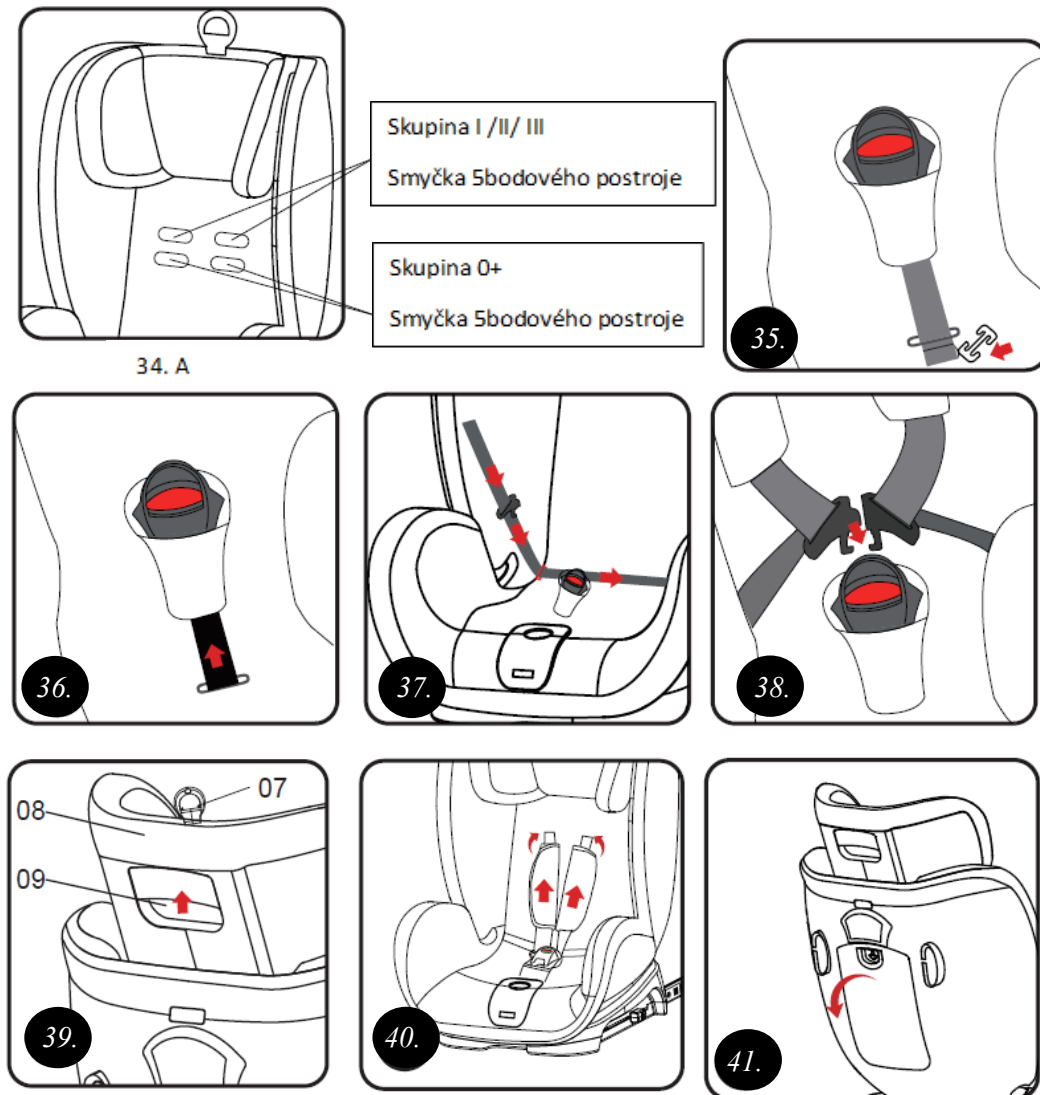




Nasazení a sejmutí textilního potahu

Textilní potah dětské sedačky lze sejmout a vyčistit. Přečtěte si prosím pokyny pro praní na textilním potahu.

Sejmutí textilního potahu:

1. Vytáhněte opěrku hlavy nahoru do nejvyšší polohy.
2. Sundejte textilní potah z opěrky hlavy.
3. Sundejte textilní potah ze sedačky.

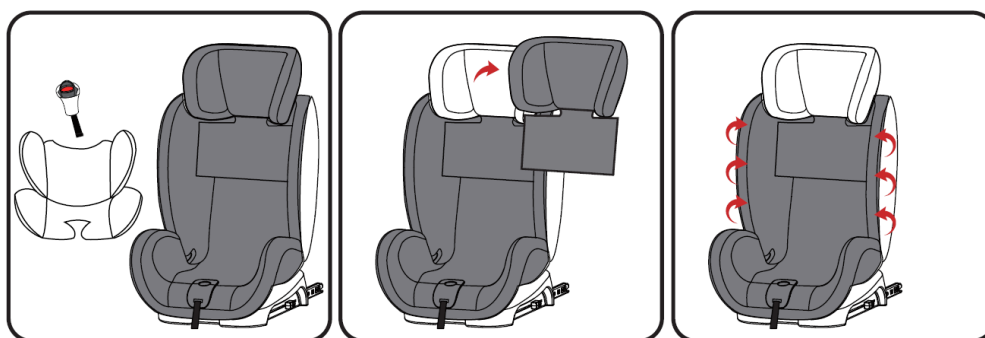

Nasazení textilního potahu Nasaďte textilní potah v opačném pořadí.



6. Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ!

Neumist'ujte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce vybavené airbagem.

- a) Nikdy nenechávejte své dítě na sedačce bez dozoru.
- b) Na autosedačce není dovoleno provádět žádné změny bez souhlasu výrobce. Nedodržení pokynů výrobce může vést k ohrožení dítěte.
- c) Doporučuje se nevystavovat autosedačku působení přímého slunce, mohla by se nadměrně zahřát.
- d) Neodkládejte na místo v prostoru zadního skla nebo jiná místa ve vozidle žádné těžké předměty bez jejich řádného zajištění. Takový předmět by mohl ohrozit bezpečnost dítěte v případě brzdění nebo při nehodě.
- e) Nepoužívejte autosedačku bez originálního čalounění. Nenahrazujte potah nebo vycpávku jiným typem, který není doporučen výrobcem, protože je nedílnou součástí autosedačky.
- f) Sedačku lze instalovat do vozidel schválených EHK/OSN podle předpisu č. 16 nebo jiných příslušných předpisů.
- g) Pevné součásti a plastové části dětského zádržného systému musí být umístěny a instalovány tak, aby za běžných provozních podmínek vozidla nemohly být zachyceny v posuvném sedadle nebo dveřích

vozidla.

- h) Během přestávky v jízdě zajistěte, aby dítě neopouštělo autosedačku bez dozoru. Vždy zavírejte dveře vozidla.
- i) Nepoužívejte autosedačku, pokud je poškozena některá z jejích částí.
- j) Požívejte pouze nastavení bezpečnostních pásů specifikovaná výrobcem. Všechny pásy upínající autosedačku k vozidlu musí být napnuté. Dětské zádržné popruhy musí být přizpůsobeny postavě dítěte a nesmí být zkroucené. Nepoužívejte jiné úchytné body než ty, které jsou popsány v návodu a jsou vyznačeny na autosedačce.
- k) Všechny břišní popruhy musí vést dostatečně nízko, aby pevně držela pánev.
- l) Zavazadla nebo jiné předměty by měly být zajištěny, aby nedošlo k úrazu dítěte.
- m) Je doporučeno vyměnit autosedačku poté, co byla vystavena silnému zatížení při nehodě.
- n) Neinstalujte autosedačku jiným způsobem, než jak je popsáno v návodu.

7. Každodenní provoz a údržba

K mytí používejte pouze neutrální čisticí prostředky a teplou vodu (do 30 °C). Materiál neperte v pračce, nesušte v sušičce a nebělte.

Pokud jsou na vnější straně autosedačky nebo upevňovacích prvků lehké skvrny, jemně je otřete houbou s neutrálním čisticím prostředkem.

5-bodová bezpečnostní přezka jako důležitý bezpečnostní prvek.

Nenamáčejte 5-bodovou bezpečnostní přezku. Pokud se účinnost přezky sníží vlivem nečistot, obraťte se na prodejce s žádostí o její výměnu.



Perte ručně



Nečistěte chemickými prostředky



Nepoužívejte bělidlo



Neždímejte



Žehlete při nízké teplotě

Oprava

- V případě požadavku na opravu kontaktujte výrobce.

Zákaznická služba

- V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavku na podporu kontaktujte výrobce.

8. Symboly



Potvrzení souladu s normami EU



Výrobce



Datum výroby



Přečtěte si návod k použití



Varování




Katalogové číslo



Výrobní číslo



Chraňte před vlhkostí

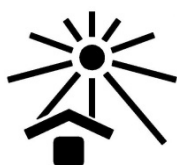

Chraňte před přímým sluncem



Max. hmotnost uživatele

9. Kontaktní údaje



mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź, Polsko
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 636 52 21
www.mdh.pl www.viteacare.com

Distributor pro ČR:
MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel. +420 272 761 102
mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

 **MEYRA**[®]