

*feel the
difference*



NETTI PRECISION™ SEDACÍ POLŠTÁŘE

Ochrana pokožky nové generace s technologií Ergomise™

NOVÁ GENERACE

ochrany pokožky

Zdravé sezení je klíčem prevence dekubitů. Vysoce výkonné polštáře Netti Precision nabízejí průlomový přístup ke stabilitě sezení, optimalizaci rozložení tlaku a tím i ochraně pokožky pro všechny uživatele invalidních vozíků – ať už mají elektrický, aktivní nebo komfortní invalidní vozík.

Naši specialisté na sezení optimalizovali každý aspekt polštářů – od rozložení tlaku, odlehčení rizikových oblastí, minimalizace maximálního tlaku až po materiál. Výsledkem jsou nejmodernější polštáře s různými stupni tvrdosti, které díky technologii Ergomise™ poskytují bezkonkurenční pohodlí, stabilitu a pokročilou ochranu pokožky: Netti Precision 1 a Netti Precision 2.

Vytvořili jsme optimální trojrozměrnou rovnováhu měkkých a pevných podpůrných zón a vrstev, která zajišťuje kontrolu držení těla a ochranu pokožky. Polštáře jsou určeny pro dlouhodobé sezení a pro osoby s citlivou kůží nebo vysokým rizikem proleženin. Sedáky Netti Precision™ jsou ihned k použití, hygienické a vyrobené pro dlouhodobý výkon.

SNADNÉ, PŘIPRAVENÉ K POUŽITÍ A BEZPEČNÉ

- ✓ Připraveno k použití ihned po dodání.
- ✓ Není potřeba žádná úprava.
- ✓ Bezúdržbové.
- ✓ Hygienické: jádro je plně prátelné při 65 °C a rychle schne.
- ✓ Protože není potřeba žádná úprava ani přizpůsobení, je riziko nesprávného použití nebo nesprávného seřízení nízké.



POLŠTÁŘE S RŮZNÝMI STUPNI TVRDOSTI PRO OCHRANU POKOŽKY A STABILITU

S technologií Ergomise™ vytváříme polštáře, které se skládají z oblastí a vrstev s různou tvrdostí – od super měkkých po velmi tvrdé. Různé tvrdosti zajišťují správnou stabilitu pánve a také nejmodernější rozložení tlaku a úlevu od něj.





NETTI PRECISION 1

- ✓ Když je uživatel vystaven riziku poranění kůže a proleženin.
- ✓ Rozložení a úleva od tlaku.
- ✓ Chrání kostní oblasti.
- ✓ Podpora pánve zajišťuje dobrou polohu při sezení.
- ✓ Dokonalé ponoření do sedáku minimalizuje riziko sklouznutí dopředu.



NETTI PRECISION 2


- ✓ Pro uživatele s citlivou pokožkou, vysokým rizikem poškození kůže nebo dokonce poranění kůže.
- ✓ Rozložení a úleva od tlaku.
- ✓ Zvýšené odlehčení tlaku na kostrč a pánevní dno.
- ✓ Podpora pánve zajišťuje dobrou polohu při sezení.
- ✓ Dokonalé ponoření do sedáku minimalizuje riziko sklouznutí dopředu.



Připraveno k použití



Stabilizující

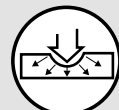

Rozložení tlaku



Prodyšné




Regulace teploty



Hygienicky pratelné na 65 °C


VYTVOŘENO S TECHNOLOGIÍ ERGOMISE™

Díky technologií Ergomise™ zajišťujeme, aby naše polštáře přinášely osvědčené výsledky. Sedáky Netti Precision™ a jejich základní technologie byly testovány v porovnání s konkurenčními polštáři nejen společností Netti, ale také testovacím institutem na Univerzitě of Pittsburghu a výsledky potvrzují vynikající výkon*.

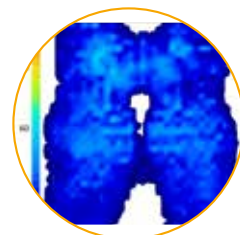


REGULACE TEPLOTY

Vysoká teplota může vést k vlhkosti, která způsobuje podráždění kůže. Materiál Netti Precision™ udržuje nízkou teplotu a tím snižuje riziko zranění. Podle testovacího institutu na Univerzitě v Pittsburghu je teplota na rozhraní mezi uživatelem a materiálem Netti Precision™ po 3 hodinách pouze 32,7 °C. Srovnatelné polštáře dosahují výsledku mezi 33,7 °C a 35,7 °C*.

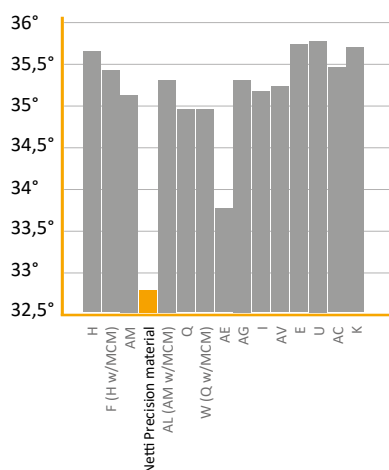


REGULACE VLHKOSTI

Vlhkost nad 60 % může zvýšit zranitelnost pokožky a způsobit tření mezi kůží a textiliemi, což může potenciálně vést k proleženinám. Proto se snažíme udržovat nízkou vlhkost. Testy Univerzity v Pittsburghu ukazují, že polštář s materiálem Netti Precision™ má po 3 hodinách vlhkost 62 %, oproti průměru 81,2 % u 14 srovnatelných polštářů*.

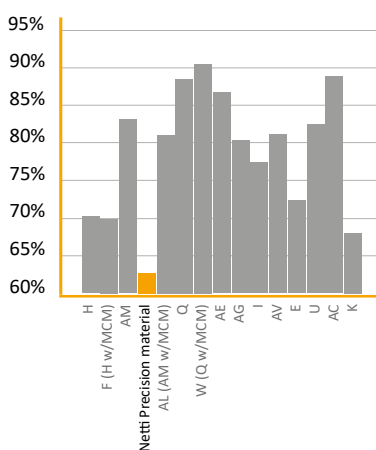

KONTROLA MAXIMÁLNÍHO TLAKU

Jakmile se proleženiny vyvinou, uživatelé invalidních vozíků se mohou potýkat s bolestivou léčbou, měsíci klidu na lůžku a hospitalizací. Netti Precision™ nabízí účinnou strategii přerozdělení tlaku, která je klíčová pro prevenci dekubitů. Tlakové mapování (pressure mapping) ukázalo, že Netti Precision™ překonává ostatní polštáře uvolňující tlak pokud jde o snížení maximálního tlaku*.

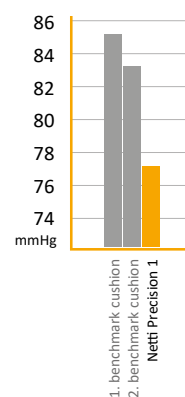

Ergomise™ Technology

S technologií Ergomise™ se nám podařilo povýšit digitální modelování na odborné znalosti v oblasti sezení. Výsledkem jsou vysoce výkonné sedáky založené na důkazech.

Materiál jádra	Jádro je vyrobeno z biokompatibilního termoplastického polyuretanu (TPU). Materiál neobsahuje žádné přidané ftaláty.
Materiál potahu	Můžete si vybrat ze 2 různých látek: • Prodyšná a pružná Stella+ s pěnovou vložkou • Otíratelná, prodyšná EasyCare+ s pěnovou vložkou vložkou
Rozměry, mm (šířka sedáku x hloubka sedáku)	Polštáře Netti Precision™ jsou k dispozici v různých standardních rozměrech, aby se hodily k běžným rozměrům sedadel: 350 x 400, 350 x 450, 350 x 500 380 x 400, 380 x 450, 380 x 500 400 x 400, 400 x 450, 400 x 500, 400 x 550 430 x 450, 430 x 500, 430 x 550 450 x 400, 450 x 450, 450 x 500, 450 x 550 500 x 450, 500 x 500, 500 x 550 550 x 500, 550 x 550 600 x 500, 600 x 550 Pokud potřebujete jiné velikosti, kontaktujte nás..
Čištění	Jádro lze prát v pračce při teplotách do 65 °C. Díky prodyšnému provedení rychle schne na vzduchu. Potahy lze prát při 60 °C.
Maximální hmotnost uživatele	Polštáře jsou dimenzovány podle svých rozměrů a mají maximální nosnost 160 kg.



MEYRA GROUP Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry
info.ry@meyragroup.com | T: +45 87 88 73 00 | www.my-netti.com

2025-05

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy našich produktů a nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby ani barevné odchylky v našich tištěných materiálech.