

Nafukovací antidekubitní polštáře

Kinéris[®]

Antidekubitní polštáře Kinéris jsou polštáře složené ze vzduchových buněk, které jsou navzájem propojené, což zaručuje plynulé rozložení tlaku a individuální přizpůsobení. Jsou vhodné pro osoby s vysokým potenciálním rizikem vzniku dekubitů (proleženin). Polštáře jednokomorové jsou vhodné pro uživatele bez problémů se stabilitou. Dvoukomorové polštáře zajišťují správnou stabilizaci pánve v sedě a tím pomáhají při prevenci vzniku ložisek dekubitů pro osoby s vysokým rizikem.



jednokomorový polštář – výška 7 cm nebo 10 cm



dvoukomorový polštář – výška 7 cm nebo 10 cm

Příklad rozložení tlaku uživatele s hmotností 75 kg a výškou 172 cm:



výsledek rozložení tlaku u polštáře vyrobeného z viskoelastického polyuretanového gelu



výsledek rozložení tlaku u polštáře vyrobeného z HR pěny – tloušťka 6 cm



výsledek rozložení tlaku u polštáře KINERIS jednokomorového

Terapeutický účinek

- snížení tlaku na kůži a podkožní tkáň
- díky propojení jednotlivých buněk dochází k omezení stříhových sil.

Přesnost nastavení

- tlak je možné nastavit pomocí manometru, který je součástí dodávky, a tím přizpůsobit polštář uživateli

Komfort


- komfort zajišťuje proudící vzduch mezi buňkami
- je prodyšný a vysoce odolný proti otěru
- odolný vůči plísním a světlu, antialergenní

Nabízíme široký výběr velikostí polštářů KINERIS: šířka a hloubka sedáku od 28,5 cm do 46,5 cm a výšky 7 nebo 10 cm.

Polštáře dodáváme vybavené nafukovacím balonkem s manometrem a tabulkou huštění dle hmotnosti uživatele.

Potah polštáře KINERIS je snímatelný a pratelný na 40°C, příležitostně možné krátké propláchnutí v 90°C.

Údržba potahu

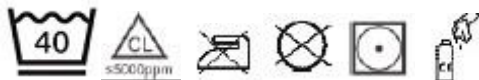

VÝROBCE

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winncare

200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30034 Nimes Cedex 1
France
www.wincare.fr

DISTIBUTOR v ČR

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Revize 01/2018

