


TECHNISCHE DATEN. TECHNICAL DATA.



	MIDI										
	24-30 cm	24-30 cm	20-26,5 cm	36-44 cm	39-48 cm	25-40 cm	23,6 cm (0") 23,9 cm (3") 24,2 cm (6")	HSH+RH+6 cm	67-74,5 cm	75 kg	
			25-32 cm 33-44 cm	39-47 cm	39-48 cm	25-40 cm	23,6 cm (0") 23,9 cm (3") 24,2 cm (6")	HSH+RH+6 cm	85,5-93 cm	75 kg	

SCHÖN BUNT. NICE AND COLOURFUL.

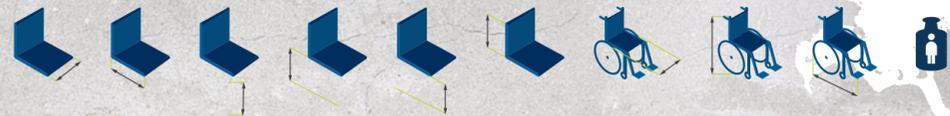

ORANGEMETALLIC
ORANGE METALLIC
CODE 4923

GREENMETALLIC
GREEN METALLIC
CODE 4922

CHROMSILBER
SILVER CHROME
CODE 4925

TORNADOROT
TORNADO RED
CODE 4066



WEISS MATT FEINSTRUKTUR
MATT WHITE
FINE STRUCTURE
CODE 208

SCHWARZ MATT FEINSTRUKTUR
MATT BLACK
FINE STRUCTURE
CODE 207

ANTHRAZIT MATT FEINSTRUKTUR
MATT ANTHRACITE
FINE STRUCTURE
CODE 225



LEMMONREFLEX
LEMON REFLECTIVE
CODE 180

BLAUMETALLIC
BLUE METALLIC
CODE 224



MEYRA®
KIDS

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
We reserve the right to make technical modifications. Additional frame colours can be selected on request at extra cost.

MEYRA 08.14 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make technical modifications to our products as well as typographical errors in and colour deviations from our printed material. Ident-Nr. 261512200



MEYRA®
KIDS

by b-w-c.de



DER ROLLENDE BLITZ

THE ROLLING LIGHTNING

Der macht alles mit, was du willst

Klassischer faltbarer Rahmenaufbau und kindgerecht bis ins Detail: extrem wendig und leicht zu bewegen. Der Flash ist perfekt geeignet für den aktiven Kinder- und Jugendbereich – vom Kindergarten bis zum Schulalter.

Cooler Design. Geringes Gewicht. Blitzschnell und wendig

Der Flash vereint Leichtigkeit und maximale Variabilität. Durch den Einsatz von leichten Materialien in Verbindung mit der minimalistischen Konstruktion wird ein maximales Ergebnis erzielt.

It does everything you want it to

A classic folding frame construction and child-friendly to the last detail: extremely agile and easy to move. The Flash is ideally suited for active children and young people, from kindergarten to school age.

Cool design. Lightweight. Lightning fast and agile

The Flash combines lightness and maximum variability. The best results are achieved by using a combination of lightweight materials and a minimalist construction.



Für kleine Kids und große Teens: der Midi- oder Maxi-Rahmen

Der Radstand und der Schwerpunkt sind individuell für perfekte Fahreigenschaften einstellbar, egal ob beim Midi-Rahmen mit 22"-Antriebsrädern oder beim Maxi-Rahmen mit 24"-Antriebsrädern.

For small children and large teenagers: the Midi and Maxi frames

The wheelbase and centre of gravity can be individually adjusted for perfect handling characteristics, be it the Midi frame with 22" rear wheels or the Maxi frame with 24" rear wheels.



Standfest und sicher – wenn du es willst

Zwei Stützrollen sorgen für maximale Sicherheit in jeder Situation. Wenn sie nicht benötigt werden, sind sie einfach und schnell nach innen wegschwenkbar.

Steady and safe – as you need it to be

Two stabilisers ensure maximum safety in every situation. If you do not need them then they can be swivelled in quickly and easily.



Viel Platz und enorme Beinfreiheit

Durch den serienmäßigen Abduktionsrahmen wird den Kindern eine enorme Beinfreiheit ermöglicht.

Lots of space and enormous legroom

The standard abduction frame gives children an enormous amount of legroom.



Kompakte Maße

Egal ob mit oder ohne Trommelbremse.

Compact size

Both with and without drum brake.



Superflexibel: ein Sitz, der mit dir wächst

Gerade bei Rollstühlen für Kinder ist die perfekte Anpassung an die individuellen Maße des Kindes extrem wichtig.

Die Sitztiefe wächst über eine Sitztiefenverstellung nach vorn und über eine teleskopierbare Rückeneinheit um 4,5 cm nach hinten mit. Die Sitzbreite verändert sich durch den Einsatz von Adaptern beim Seitenteil.

Der teleskopierbare Hinterrahmen ist optimal für Sitzschalenversorgungen.

Super flexible: a seat that grows with you

It is incredibly important, especially for wheelchairs for children, that the wheelchair adjusts perfectly to the measurements of the user.

The seat depth can be increased at the front via a seat depth adjustment and by 4.5 cm at the back via a telescopic back unit.

The seat width can be changed by using the adapters near the side guard.

The telescopic rear frame is ideal for seat shell care.



Dynamisch und extrem wendig. So wie du

Kids sind wild, wollen die Welt entdecken und mit ihren Freunden toben.

Flash lässt sich leicht steuern und ist sehr wendig.

Die fest verschweißten Lenkradaufnahmen mit der integrierten Verstellung, weit vorn montierten Lenkrädern und dem Radsturz von 0°, 3° oder 6° tragen dazu bei.

Dynamic and incredibly agile. Just like you.

Children are wild, they want to explore the world and rollick about with their friends.

The Flash is easy to handle and very agile.

The welded front wheel attachments with integrated adjustment and wheels installed at the very front along with the camber of 0°, 3° or 6° all contribute towards this.



Perfekt einstellbare Unterschenkelänge

Stufenlos einstellbar ab 20 cm.

Sicher und haltbar über Adapter und jederzeit leicht und einfach zu verstellen, wenn es gewünscht ist.

Die Einstellung der maximalen Unterschenkelänge beim Maxi-Rahmen erfolgt einfach über den Rahmen.

Das Fußbrett bietet viel Platz zum Einsteigen. Es ist tiefen- und winkelverstellbar, hochklappbar und optional verriegelbar.

Ideally adjustable lower leg length

Progressively adjustable up to 20 cm.

Safe and stable thanks to the adapter and easy to adjust any time you need.

The maximum lower leg length on the Maxi frame can be easily adjusted via the frame itself.

The footrest provides lots of space to get on. The depth and angle of the footrest can be adjusted and it can also be folded up and is optionally lockable.